

eakin® ™






**PELICAN**™  
Pouches  
BØRNESERIE

# BLID OG SKÅNSOM BESKYTTELSE TIL SART HUD



PELICAN pædiatri poser er særligt udviklet til børn. Der er lagt meget vægt på at sikre, at disse poser er af samme høje kvalitet som resten af sortimentet.

PELICAN børneposer har mange unikke fordele, som gør plejen af stomien nemmere og sikrer, at huden omkring stomien holdes intakt.

-  Hudklæberen er hypo-allergen og er blid og skånsom på sart børnehud, nøjagtigt som du kan forvente af samtlige Eakinprodukter. Klæberen er ultra-tynd, den former sig og giver en sikker pasform.
-  Det silkebløde stofydre føles svalt og behageligt mod huden. Stoffet med små bamser påtrykt har en lille slids foran som sikrer, man nemt kan se stomien.
-  Vandtæt filter tillader kontrolleret lugtfri luftafgang. Ved behov for tildækning af filtret kan de vedlagte bamsemærkater nemt påsættes gennem slidsen på posens forside.

## PELICAN BØRNEPOSE TØM BAR

PELICAN børneposer har klipsfri lukkesystem som sikrer en hurtig og nem måde at tømme og rengøre posen på.



Bøj udløbet som vist.



Træk op i snippen - det sikrer en stor åbning for tømning og rengøring.



Efter tømning foldes posen op og fastgøres med velcroen.

# PELICAN NEONATAL TØMBAR POSE

Den mindste Neonatalpose (839703) er uden starthul i klæberen, hvilket gør den nem at tilpasse til loop-ileostomier og mukøse fistler.



# PELICAN BØRNE UROSTOMIPOSE

TG Eakin Ltd. har også en Børne urostomipose af høj kvalitet i PELICAN sortimentet. Udover en sikker hudklæber samt silkeblød stof for-og bagside med slids har PELICAN børne urostomiposen også andre fordele :

- 👤 Udløbsproppen på urostomiposen er ekstremt blød, flexibel og sikker. Tømning kontrolleres ved at klemme udløbet sammen.
- 👤 Det bløde udløb gør det muligt at forbinde posen sikkert til de fleste natdrænageposer uden behov for ekstra konektor.
- 👤 Udløbsstudsens har stof bagest og giver derfor komfort mod huden, mens der forrest under studsens er plastik som kan aftørres.
- 👤 PELICAN Børneurostomipose er specielt designet til, at sikre minimal samling af urin ved basis af posen og fremme komplet tømning. Tilbageløbsventil i posen forhindrer tilbageløb af urin og forebygger infektion.



# KOMFORTABEL CONVEXITET

PELICAN Børneserien er senest udvidet med de komfortable CONVEXE børneposer : en tømbar convex samt en urostomipose med convex klæber.

Poser med convex klæber anvendes især ved lav stomi eller tilbagetrukket stomi, hvor der opleves lækage.

Udover de fordele der generelt er ved PELICAN poser, såsom blødt stof, klipsfri lukning og vandtæt filter, er der for de convexe poser også disse unikke fordele :



- Den fleksible, bløde hudklæber tilpasser sig til mavens individuelle form og smyger sig tæt omkring stomien. Den bløde convexitet bevirker at stomien tømmer sig i posen og derved forhindres lækage. PELICANs bløde convexitet bevirker extra sikkerhed mod lækage, og samtidig undgås de problemer der kan forbindes med mere traditionelle, stive convexprodukter.
- Hudklæberen er holdbar og giver lang tids beskyttelse. Som alle Eakinprodukter, er den meget hudvenlig og behagelig at bære. Et fleksibelt skumlag under klæberen giver ekstra komfort mod huden.
- Starthullet er 5 mm og kan klippes til 30 mm og giver stor fleksibilitet for anvendelsen. Materialet er nemt at klippe i og efterlader en blød kant for ekstra komfort.
- For yderligere sikkerhed mod lækage kan en Cohesive SLIMS® bruges under posens klæber.


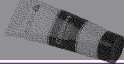
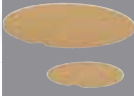



*Alle convexprodukter bør anvendes i samråd med en stomisygeplejerske.*

**PELICAN**<sup>™</sup>  
Pouches  
**BØRNESERIE**




# TILBEHØR - UDEN ALKOHOL



"Hr. Eakin, tak fordi du opfandt Cohesive SLIMS®. Jeg blev født for tidligt i 25 uge og da jeg var 6 dage gammel fik jeg hul på tarmen og måtte have 2 stomier. Sygeplejerskerne beskytter min hud ved at bruge en tilpasset Cohesive SLIMS® rundt om stomierne. Det betyder, at posen nogle gange kan blive siddende i en hel uge. Min hud er overhovedet ikke øm og jeg kan endda ligge på maven uden lækage. Endnu engang tak. Hilsen fra Jessica, Australien."



Små Cohesive SLIMS® ringe - Modellerbare			
	Forebyggelse af lækage, giver komfort og sikkerhed til alle typer, faconer og størrelser af stomier.	Æske med 30 ringe	839005
Cohesive® PASTA			
	Cohesive® PASTA er en unik alkohol-fri pasta ideel til at udfylde folder og ar.	1 tube (60g)	839010
Surround™ Hudbeskyttelse			
	Hudbeskyttelse der kan anvendes til bl.a. PEG-sonder, Mickey-sonder til at give en vandtæt og bakteriel barriere til huden. Cohesive® materialet sikrer beskyttelse af huden og ophevelse af allerede skadet hud.	10 store hudbeskyttelsesplastre (98mm)	839011
		20 små hudbeskyttelsesplastre (58mm)	839012
Perform™ Geldannende Middel			
	Gelposer der anvendes i stomiposen. Opløses og fortykker tyndt stomioutput til en gel. Øger sikkerheden om natten ved at forebygge lækage. Reducerer lyd og lugt.	60 gelposer	839020
Release™ Klæberfjerner			
	Siliconebaseret ALKOHOLFRI klæberfjerner med tilsat E-vitamin.	50ml spray	839023
		30 servietter	839024
Protect™ Hudbeskyttelses Film			
	En siliconebaseret hudbeskyttelses film barriere. Tilsat E-vitamin, Beskytter huden mod skadelige kropsvæsker og stripping.	30 servietter	839025

# VARENUMRE

		Størrelser		Antal/ æske	Varenumre
	Eakin PELICAN Børnepose tømbar	Opklipbar 10-50mm	Klar pose med blødt stofovertræk	30	839701
	Eakin PELICAN Neonatal tømbar pose	Opklipbar 0-40mm	Klar pose med blødt stofover- træk	30	839703
	Eakin PELICAN Børne Urostomipose	Opklipbar 10-50mm	Klar pose med blødt stofover- træk	30	839706

		Størrelser		Antal/ æske	Varenumre
	Eakin PELICAN convex tømbar Børnepose	Opklipbar 5-30 mm	Klar pose med blødt stofovertræk	10	839707
	Eakin PELICAN convex urostomi Børnepose	Opklipbar 5-30 mm	Klar pose med blødt stofovertræk	10	839708

## Specifications - Flat Paediatric

	Eakin PELICAN Børnepose tømbar	Eakin PELICAN Neonatal tømbar pose	Eakin PELICAN Børne Urostomipose
Size	Opklipbar 10-50mm	Opklipbar 0-40mm	Opklipbar 10-50mm
Flange size	80 mm	60 mm	80 mm
Capacity	300 ml	100 ml	100 ml

## Specifications - Convex Paediatric

	Eakin PELICAN convex tømbar Børnepose	Eakin PELICAN convex urostomi Børnepose
Size	Opklipbar 5-30mm	Opklipbar 5-30mm
Flange size	80 mm	80 mm
Convex depth	3 mm	3 mm
Capacity	300 ml	100 ml



ALLE PELICAN børneposer har beige stof for og bag, men via slids forrest kan man se stomi og poseindhold, når det ønskes, da inderfolien er klar.



Manufactured by:  
TG Eakin Limited  
15 Ballystockart Road  
Comber  
Northern Ireland  
BT23 5QY

Kontakt os venligst for mere information og gratis prøver

Focuscare Denmark ApS.  
Østervangsvej 21  
DK-8900 Randers  
Telefon: +45 49 26 13 99  
Fax: +45 49 21 02 57  
Email: [info@focuscare.dk](mailto:info@focuscare.dk)  
[www.focuscare.dk](http://www.focuscare.dk)

Focuscare

